

Kryotherapie-Kit für Brustoperationen Breast Icing



Zusammensetzung des Pakets

Ref. EST60-SEIN



Kältepackung für die
linke Brust



Kältepackung für
die rechte Brust



Sangle dorsale



Verlängerungsstück

ANLEITUNGEN




1

Legen Sie den Rückengurt flach auf eine ebene Fläche, wobei die Klettverschlüsse nach oben zeigen (roter Pfeil).



2

Bei Bedarf ist eine Verlängerung für den Rückengurt erhältlich.

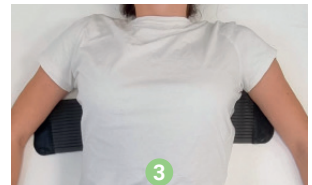

3

Sich darüber legen, so dass sich der Rückengurt auf gleicher Höhe mit den Brüsten befindet.




4

Positionieren Sie den Kältepack der rechten Brust (die ohne Klettverschlüsse), indem Sie den Warzenhof in der Mitte des Lochs platzieren.



5

Positionieren Sie den anderen Kältepack auf der linken Brust und befestigen Sie dann die beiden Klettverschlüsse an dem Pack, der die rechte Brust bedeckt.

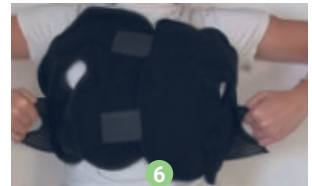

6

Stecken Sie auf beiden Seiten Ihre Finger durch die Öffnungen des Rückengurts und befestigen Sie diesen an jedem Kältepack.



Idealerweise das Breast Icing System sollte im Liegen benutzt werden, auf die Gefahr hin, dass die Kältepackungen nicht an Ort und Stelle bleiben.

Indications

Ein- oder beidseitige Brustoperationen, Verkleinerung, Vergrößerung (Prothesen und/oder Fett), Rekonstruktion (mit Ausnahme von freien Lappen wie Diep, Gracilis, Pap) und nach teilweiser Abtragung (Tumorektomie) oder totaler (Mastektomie), gestielte Lappen. Mastodynie bei fibrozystischer Mastose und/oder vor der Menstruation, Brustschwellung, Brustinfektionen (zusätzlich zur Behandlung mit Antibiotika und lokal üblich).

Gynäkomastie-Operation in Verbindung mit oder ohne periphere Liposuktion.

Contraindications

Brustrekonstruktion durch freien Lappen (Diep, Gracilis, Pap), mikrochirurgische Rekonstruktionen, Kryoglobulinämie, Kälteallergie, Kälteunempfindlichkeit, Arteriitis, Diabetes.

Risiken bei der Verwendung und vorsichtsmassnahmen bei der Verwendung

Dieses Medizinprodukt muss gemäß der ärztlichen Verschreibung Ihres Arztes oder gemäß den Anwendungsempfehlungen Ihres ordnungsgemäß befugten Angehörigen der Gesundheitsberufe (Apotheker, Physiotherapeut, Orthopädietechniker usw.) angewendet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie dafür, dass die Verwendung dieses Produkts Verletzungen verhindern kann. Es ist unbedingt erforderlich, die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Bestandteile der Packung vor dem Gebrauch zu überprüfen.

Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.

Es gibt Faktoren, die das Risiko einer Hautverbrennung begünstigen können (unterernährte Patienten, übermäßiges Rauchen, insulinabhängige Diabetiker oder auch Menschen mit empfindlicher Haut): In diesen Fällen ist eine engmaschige medizinische Überwachung empfehlenswert.

Die Kältepacks dürfen niemals direkt mit der Narbe oder der Haut in Berührung kommen. Legen Sie sie stattdessen über den Kompressions-BH oder verwenden Sie ein Schutz Tuch.

Kältepacks sollten vor der Verwendung weich und frostfrei sein.

Kältepacks nicht erhitzen oder erwärmen.

Bei Beschwerden oder Unwohlsein entfernen Sie die Kältepacks

Kältepacks nicht durchlöchern.

Wenn Gel austritt: Das Gerät mit Handschuhen anfassen, das Gel nicht verschlucken, das Gel nicht in ein an die Kanalisation angeschlossenes Abflusssystem oder in ein Fließgewässer schütten.

Werfen Sie das Gerät nicht in die Natur oder in den Hausmüll. Die Entsorgung erfolgt über den Sondermüll in der Abfallentsorgung.

Bei direktem Kontakt des Gels mit der Haut sofort mit reichlich kaltem Wasser abspülen.

Wenden Sie sich bei anhaltender Reizung an Ihren Arzt.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Personen, die nicht in der Lage sind, dieses Gerät zu benutzen, aufbewahren.

Pflege

Die Coolpacks können von Hand mit einer milden Seife gewaschen werden. Erhitzen oder erwärmen Sie die Kältepacks nicht. Nicht in der Waschmaschine waschen und niemals Bleichmittel verwenden. Nicht in ein Desinfektionswaschmittelbad eintauchen.

Falls nötig, sprühen Sie eine desinfizierende Reinigungslösung auf (ANIOS Desinfektionsreiniger für hohe Oberflächen).

Flach an der Luft trocknen lassen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Firma Body Icing oder besuchen Sie www.bodyicing.com



WARNUNG

Dieses Medizinprodukt ist ein reguliertes Gesundheitsprodukt, das im Rahmen dieser Regulierung das CE-Zeichen trägt.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung aufmerksam durch und beachten Sie die Hinweise zur Benutzung.

Wenn Schmerzen, Schwellungen, ungewöhnliche Empfindungen, Entzündungen oder allergische Reaktionen auftreten, stellen Sie die Verwendung des Medizinprodukts sofort ein und wenden Sie sich so schnell wie möglich an Ihr medizinisches Fachpersonal (Apotheker, Physiotherapeut, Orthopädietechniker usw.) und an Body Icing: +33 801 790 000 oder www.bodyicing.com.

Im Falle einer schwerwiegenden Reaktion den Händler und die zuständige Behörde in Frankreich kontaktieren.



Vorrichtung
Medizinisch



Entspricht den
Anforderungen der
der Europäischen
Union



Chargen-
bezeichnung/
Losnummer



Ein einziger
Patient -
zur Mehrfach-
verwendung



Bestellnummer



Verfallsdatum



Temperatur-
grenze



Gebrauchsan-
weisung beachten
zum Gebrauch
konsultieren



Beachte
die Hinweise
Gebrauchsan-
weisung



Ohne Phthalate



Latexfrei



Nicht öffnen
mit einem
Gegenstand
scharf



Waschen mit
der Hand



Nicht
biegen



Nicht
javellieren



Trocknen
maschinell
oder trocken
verboten



Gefährlich für
die Umwelt